

# PM-CARE® REMOV-KIT

16

## SET DE RETRAIT DE STÉRILET




PINCE  
D'EXTRACTION



PINCE DE POZZI  
DROITE



CISEAUX COUPE  
FIL DISTAL

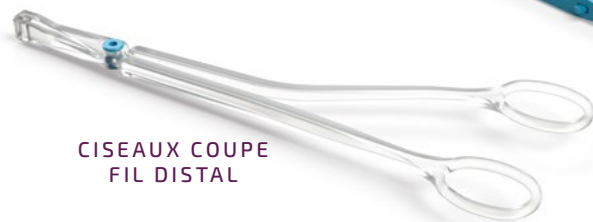

HYSTÉROMÈTRE



Le set de retrait de stérilet **PM-CARE® REMOV-KIT** permet l'extraction d'un dispositif intra-utérin de la cavité utérine. Il est composé d'une pince de Pozzi, d'une pince d'extraction, d'une paire de ciseaux coupe-fil et d'un hystéromètre.

### COMPOSITION DU SET DE RETRAIT DE STÉRILET :

- La pince de Pozzi droite permet la préhension du col utérin et la réalisation d'une "traction-fixation" sur le col utérin afin de permettre d'ajuster l'angle de flexion de l'utérus à 180°. Cette correction de l'angle de flexion est nécessaire lors du retrait du dispositif intra-utérin sans prendre le risque de perforer l'utérus.
- La pince d'extraction de stérilet permet de retirer en douceur et de nettoyer l'utérus et la zone de travail.
- Les ciseaux coupe-fil distal permettent de couper les fils du dispositif intra-utérin.
- L'hystéromètre permet d'apprécier la profondeur de la cavité utérine.

### RÉFÉRENCE(S) DISPONIBLE(S)

Référence	PINCE DE POZZI Modèle	PINCE D'EXTRACTION Fournie	CISEAUX COUPE-FIL Modèle	HYSTÉROMÈTRE Diamètre (Fr)
PS3620000	Droite	Oui	Distal	14

### INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL

Date de 1 <sup>re</sup> mise sur le marché	2011
Usage unique	Oui
Classe	Is
Stérile	Oui
Mode de stérilisation	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
Présence de latex	Non
Durée de vie	5 ans
Certification	CE
Conditionnement	Boîte de 10 unités en emballage individuel stérile
Stockage	Dans sa boîte d'origine dans un endroit frais et sec

PRINCE MEDICAL SAS  
ZA La Sente Du Moulin  
64 rue Gutenberg - 60530 Ercuis - France  
www.prince-medical.com  
Tél. : +33 (0)3 44 26 54 76  
prince-medical@omerin.com

**PRINCE** MEDICAL  
DEVICES

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. La société PRINCE MEDICAL SAS ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur et de non-respect des notices d'utilisation fournies. Les dispositifs médicaux commercialisés par PRINCE MEDICAL SAS ne doivent être utilisés que par un praticien ou une personne autorisée dûment qualifiés.

® Marque déposée de PRINCE MEDICAL SAS. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PRINCE MEDICAL SAS.